


braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADATM
healthcare

relaxmyway

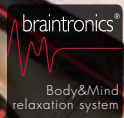

QUATTROMED V



< relaxmyway

A 2000-ben történt alapítása óta a CASADA név egyet jelent kiváló minőségű masszáz és fitnesz termékekkel.

Napjainkban világszerte 37 országban kaphatók a CASADA-termékek. A CASADA-termékeket nem csak a folyamatos fejlesztés, az egyedi formatervezés és az életminőség javítására összpontosító nagyfokú irányultság jellemzi, kitűnnek megbízható és kiváló minőségükkel is.

Gratulálunk

A masszírozó készülék megvásárlásával Ön egészségtudatosságát igazolja.

Annak érdekében, hogy hosszú ideig tudja használni a készülék nyújtotta előnyöket, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat.

Kívánjuk, hogy lelje örömét az Ön személyes Quattromed V készülékében.

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások	84
A csomag tartalma.....	87
Felállítás Üzembe helyezés	88
Hibakeresés	89
Jellemzők.....	90
Távírányítás	92
Tárolás tisztítás	96
Műszaki adatok	96
EU megfelelőségi nyilatkozat.....	96
Garanciális rendelkezések	97

Biztonsági utasítások



A masszírozó készülék használatba vétele előtt, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat a kifogástalan működés és az optimális hatás érdekében. Kérjük őrizze meg ezt a használati útmutatót!

- Ez a masszírozó készülék megfelel a technika elismert alapelveinek és az aktuális biztonsági előírásoknak.
- Ez a készülék nem igényel karbantartást. Az esetleg szükséges javításokat kizárólag erre felhatalmazott szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat, valamint a jogosulatlan javítás biztonsági okokból tilos, és a garancia, ill. a jótállás elvesztését eredményezi.
- Soha ne nyúljon vizes kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz.
- Kérjük, ne hagyja, hogy a készüléket víz, magas hőmérséklet és közvetlen napsugár érje.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, hogy megelőzze a rövidzárlat veszélyét.
- Ne használjon sérült hálózati csatlakozódugót, hálózati kábelt vagy laza foglalatokat. Ha a csatlakozódugó vagy a hálózati kábel sérült, akkor azt a gyártóval, a szervizképviselettel vagy szakképzett személlyel kell kicseréltetni.
- Működési zavar esetén azonnal szüntesse meg az áramellátást.
- A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használat kizárja a kártérítési kötelezettséget.
- Az izmok és az idegek túlzott stimulációjának elkerülése érdekében, ne lépje túl a 30 perces ajánlott masszírozási időt.
- Minden masszázst – a kézzel masszázst is – mellőzni kell, ha Ön terhes és/vagy Önnél az alábbi panaszok közül egy vagy több figyelhető meg a masszírozás területén: friss sérülés, trombózisos betegség, mindenféle gyulladás és duzzanat, valamint rákos megbetegedés. Ha betegségek és bántalmak miatt orvosi kezelés alatt áll, azt javasoljuk, hogy a masszírozás előtt egyeztessen kezelőorvosával.
- Ne használja a készüléket vezetés közben.
- Amennyiben Ön elektromos segédeszközöket, például szívritmus szabályzót használ, mindenképpen kérdezze meg orvosát a masszírozás előtt.
- A mellékelt csomagolóanyagot nem szabad játékszernek használni.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott testi, szellemi vagy érzékszervi képességekkel, illetve hiányos szakismerettel rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatás és a használathoz fűződő veszélyek megértése után használhatják.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óvatosan járjanak el a készülék használatánál.
- A készülék üzemeltetése csak a vele szállított tartozékokkal megengedett.

ELLENJAVALLATOK „BRAINTRONICS“

- Pszichózisok (pl. skizofrén vagy bipoláris zavarok, endogén depressziók)
- Személyiségzavarok
- Epilepszia és hasonló, rohamokkal járó megbetegedések
- Szívbetegségek
- A központi idegrendszer megbetegedései
- Trombózis
- Endogén depressziók
- ADS (figyelemzavar)
- Rövid ideje fellépett szívinfarktus vagy szélütés
- Szellemi fogyatékoság
- Szervedélybetegségek mint kábítószer-, alkohol- és gyógyszerfüggőség
- Pszichoaktív szerek rendszeres szedése
- Terhesség

TUDNIVALÓ: Etikai és jogi okokból ne alkalmazzon braintronics-ot gyermekeknél és fiataloknál a törvényes képviselő kifejezett hozzájárulása nélkül. Olyan személyek, akiknél meditáció által hitbeli konfliktusok léphetnek fel, kerüljék az alkalmazást.

A csomag tartalma



- Hálózati tápegység 24 volt
- Használati útmutató
- Nyakpárna
- Hátrész
- Ülőrész
- Redukciós párna
- Távirányító
- Imbuszkulccsal


Felállítás | Üzembe helyezés

1. Nyissa ki a dobozt, vegye ki a tápegységet és tegye le a közelben.
2. Óvatosan húzza ki a textiltáskát a dobozból, cipzározza ki és vegye ki a védőfóliába csomagolt Quattromed V készüléket és az ülőpárnát.

3. Vegye le a védőfóliát.


4. A BIZTONSÁGI CSAVAR ELTÁVOLÍTÁSA

A mellékelt imbuszkulccsal tekerje ki a masszázskészülék hátoldalán található csavart. A Quattromed V védelme érdekében a szállítás során egy biztonsági csavar található a hátoldalán. Kérjük, távolítsa el ezt az első használat előtt.

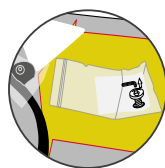


FIGYELEM! A csavart nem tesszük vissza!


5. A matrac / a borító egy cipzárral, a nyakpárna (1. ábra) a fejrésznél pedig egy tépőzárral elválasztható a hátrésztől. Az első használat előtt távolítsa el a védőkartont a borító és az eszköz közül. A kipárnázott hátmatrac egy kíméletesebb masszázsról gondoskodik. Az intenzív masszázs érdekében távolítsa el a hátmatracot.
6. A hát- és az ülőrész a szállításkor nincsen összekapcsolva. A párhuzamos használathoz vegye ki a távirányítót az ülőrész zsebéből és ezután rögzítse mindkét részt a rajtuk lévő cipzárral. (2. ábra)
7. Végeztesse az ábra szerint dugja össze a vezetékét. (3. ábra)
8. Helyezze a Quattromed V-t egy megfelelő székre, vagy fotelre. A masszírozó készülék egy háttámlapánttal van ellátva. Ez lehetővé teszi Önnek a készülék stabil elhelyezését a széken vagy fotelon. Ehhez állítsa a masszírozó készülék hátrészét az ülőalkalmatosság háttámlájához, tekerje körbe rajta a háttámlapántot és rögzítse ebben az állásban a tépőzár segítségével.
9. Végeztesse kapcsolja össze a tápegységet a csatlakozóvezetékkel (4. ábra) a hátrészen, dugja a hálózati dugót a konnektorba és kapcsolja be a Quattromed V-t az „On/Off”-gombbal.

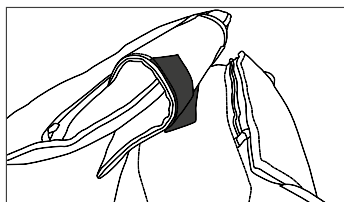


(Ábra 1)

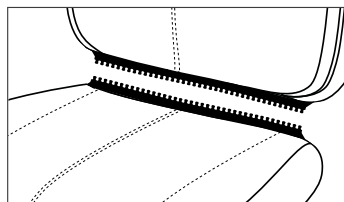

(Ábra 2)

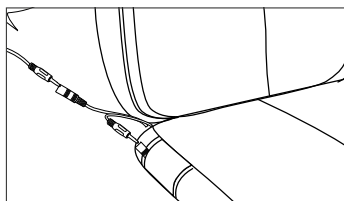

(Ábra 3)

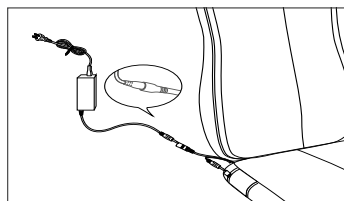

(Ábra 4)

Hibakeresés


HIBA

- A készülék csatlakoztatva van az áramhálózathoz, ugyanakkor sem a készülék, sem a távirányító nem működik.
- A készülék csatlakoztatva van az áramhálózathoz. Az ülőrész rezgése működik, de nem lehet leállítani. A távirányító és a masszázs nem működik.
- A készülék csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A rezgő masszázs nem működik.


MEGOLDÁS

- Ellenőrizze, hogy minden dugós összeköttetés megfelelően lett-e párosítva.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápegység teljesen csatlakozik-e.
- Tartós használat mellett a készülék túlhevülhet. Ezért kapcsolja ki, állassa le az áramhálózatról és hagyja teljesen lehűlni azt.
- Ellenőrizze, hogy a rezgés és a tápegység minden dugós összeköttetése megfelelően lett-e párosítva.
- Ellenőrizze, hogy a rezgés minden dugós összeköttetése megfelelően lett-e párosítva.


Jellemzők

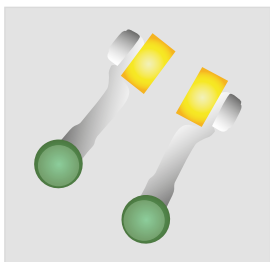

A Quattromed V összesen négy masszírozó fejjel és „Shiatsu, Tapping és Rolling” masszázstechnikával masszíroz. A mozgatható szilikon masszírozó fejek, valamint két további fix masszírozó fej masszírozzák a hát izomzatát. A kellemes, pihentető mélyre ható melege hitelesített jade kövekkel ellátott masszírozófejek gondoskodnak.

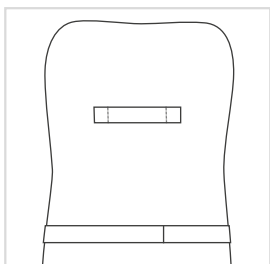

A hátoldalra rögzített felső pánt a Quattromed V felállításához és pozícionálásához nyújt segítséget és nem alkalmas arra, hogy annál fogva vigyék. Szállítás során feltétlenül ügyeljen arra, hogy a masszírozó eszközt mindkét kezében erősen tartva vigye. Az alsó tépőzárak a Quattromed V rögzítésére szolgálnak a kívánt ülőalkalmatosságon és biztos állást nyújtanak a masszírozó alkalmazás során.

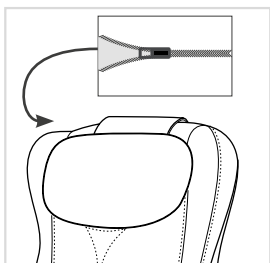

Praktikus és egyszerűen eltávolítható a Quattromed V párnája/huzata a hátrészen található cipzár és tépőzár segítségével tisztítás vagy intenzívebb masszírozás céljából.



A talpon történő vibrációs masszírozáshoz oldja le az ülőrészt a cipzáron keresztül és helyezze kényelmesen a lábfej alá.

braintronics® BRAINTRONICS®

A braintronics® technológia audióstimuláció segítségével szinkronizálja az Ön agyhullámait. Egy speciálisan kifejlesztett masszázsprogram kombinációjával pihenteti az Ön stressztől terhes szervezetét.

brainwave stimulation system

Jellemzők



GÖRGETÉS

A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kellemes váltakozása, ezért különösen nyugtató és pihentető. Ezt a technikát gyakran alkalmazzák a masszírozás végén az izmok ellazításához és kikapcsolódás gyanánt.



SEBESSÉG

A masszázs-sebesség beállítható.



VIBRÁCIÓ

A vibráció egyenletes, egészen mélyre hatoló rezgésbe hozza a test részeit. Élénkíti a szövetek keringését.



JÁDE HŐ

A jade a természetes hőtárolók és hővezetők közé tartozik. A célnak megfelelően integrált masszírozó fejek mélyre ható meleget nyújtanak és lazító hatással vannak.



AUTOMATIKA

A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program különböző masszázstechnikák széles választékát kínálja. Itt a meleg/fűtés funkció igény szerint bekapcsolható.



PONT

A masszírozó fejek pontosan tudnak masszírozni.



SHIATSU

A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy serkentse a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.



SZÉLESSÉG

A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).



MAGASSÁG

A masszázstechnika magasságkorlátozásának szabályozása 2 fokozatban.



3D MASSZÁZS

Ennek az új technikának során a masszázsróbot nem csupán fel és le, hanem előre és hátra is mozog.



BLUETOOTH

Kábel nélküli adatátvitel.

Távirányító

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. POWER | 9. LASSÚ-GYORS GYORS – LASSÚ
[SLOW FAST] – [FAST SLOW] |
| 2. AUTOMATA PROGRAMOK | 10. WIDTH |
| 3. MAGASSÁG SZABÁLYOZÁSA | 11. LO HI |
| 4. MELEG | 12. UP DOWN |
| 5. VIBRATION | 13. FULLBACK |
| 6. SHIATSU | 14. UPPER |
| 7. TAPPING | 15. LOWER |
| 8. LASSÚ-GYORS [SLOW FAST] | |



Távirányító

1) POWER

Az eszjöz be- és kikapcsolása.

2) AUTOMATA PROGRAMOK

A masszírozó eszköznek 3 automata programja van. Nyomja meg [Program] és válasszon CALM (nyugtató - kék LED), REFRESH (frissítő- zöld LED), RECOVERY (lendületes - piros LED). Minden választás után leáll a motor. A masszírozó eszköz az automata programot először csak utána kezdi.

CALM:	Dőljön egyszerűen hátra, kapcsolódjon ki, pihenje ki magát és lazuljon el.
REFRESH:	Küzdje le a fáradtság jeleit és szerezze vissza energiáját.
RECOVERY:	Átható masszázstechnika. Ideális masszázs hátának erősítésére és tehermentesítésére.

3) MAGASSÁG ÁLLÍTÁS

Ha a(z) [automata program] / [FULLBACK] / [UPPER] / [LOWER] közül választott, nyomja meg a [Height] gombot, hogy aktiválja a magasság állítás funkciót. A maximális magassághoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a [Height] gombot.

4) MELEGÍTÉS

A [Heating] funkció a [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto] programok kezdetén aktív. A meleg masszázs közbeni le- és ismételt visszakapcsolásához nyomja meg a gombot ismét.

5) VIBRÁCIÓ

A [Vibration] a [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto]/[Area] funkcióknál mindig be- és lekapcsolható. Nyomja meg a [Vibration] gombot, a vibráció funkció bekapcsolásához. A vibráció 1,5 perces ritmusokban halad.

6) SHIATSU

Nyomja meg a [Shiatsu] gombot, a Shiatsu- funkció bekapcsolásához. Az állandó sebesség közepes. Ha az eszköz Auto üzemmódban van, akkor ez leállítja az Auto üzemmódot. A befejezéshez nyomja meg ismét a [Shiatsu] gombot.

7) TAPPING (VEREGETÉS)

Nyomja meg a [Tapping] gombot, a [Tapping] funkció bekapcsolásához. Az állandó intenzitás közepes. Ha az eszköz Auto üzemmódban van, akkor ez leállítja az Auto üzemmódot. A befejezéshez nyomja meg ismét a [Tapping] gombot.

8) SLOW (LASSÚ) | FAST (GYORS)

Az ütügetés sebessége három fokozatban állítható: Gyors-közepes-lassú. A lassú [Slow] és gyors [Fast] funkciók csak akkor működnek, ha a [Tapping]-ot választotta. Nyomja [Slow] gombot, hogy csökkentse az ütügetés sebességét és a [Fast] gombot a növeléséhez.

Távirányító

9) SLOW – FAST | FAST – SLOW

A [Slow – Fast] és [Fast – Slow] funkciók csak akkor működnek, ha a [Tapping]-ot választotta. Nyomja meg a két gomb egyikét és a masszázs ideje automatikusan változik lassúról gyorsra és gyorsról lassúra.

10) WIDTH

A [Width] funkció csak akkor működik, ha a [Tapping]-ot választotta. A [Shiatsu]-nál a [Width] funkció nem lehetséges. A [Width] gomb minden megnyomásával a masszázsgörgők szélessége 3 lépésben állítható, a keskenytől a szélesig. A [Width] gomb 4. megnyomásával aktiválja a szélességbeállításokon történő automatikus átfutást.

11) LO | HI

A Shiatsu intenzitása három fokozatban állítható: Gyors-közepes-lassú. A [LO Shiatsu Speed] és a [HI Shiatsu Speed] funkciók csak akkor futnak, ha kiválasztja a [Shiatsu]-t. Nyomja meg a [LO Shiatsu Speed] a Shiatsu intenzitásának csökkentéséhez és a [HI Shiatsu Speed] gombot a növeléséhez.

12) UP | DOWN

A masszázsgörgők vezérlőgombja a hátán történő pontos beállításához. A pontmasszázs közben ennek a gombnak a nyomva tartásával változtathatja a masszázs területét felfelé vagy lefelé.

13) FULLBACK

Alapprogram a teljes hátra. A program a „Rolling” masszázstechnikával masszírozza az egyes háttájékokat. A [Tapping]/[Shiatsu]/[Heating]/[Vibration] funkciók választhatóan bekapcsolhatók.

14) UPPER (FELJEBB)

Alapprogram a hát felső részéhez. A program a „Rolling” masszázstechnikával masszírozza az egyes háttájékokat. A [Tapping]/[Shiatsu]/[Heating]/[Vibration] funkciók választhatóan bekapcsolhatók.

15) LOWER (LEJEBB)



Alapprogram a hát alsó részéhez. A program a „Rolling” masszázstechnikával masszírozza az alsó háttájékokat. A [Tapping]/[Shiatsu]/[Heating]/[Vibration] funkciók választhatóan bekapcsolhatók.

Tárolás | tisztítás

Rendszeres karbantartással Ön növeli a Quattromed V élettartamát, ugyanakkor minden esetben biztonságos működésről gondoskodik.

1. Ajánlott tárolás: Száraz, pormentes helyen.
2. Tartsa távol a Quattromed V készüléket folyadékoktól és nyílt lángtól.
3. A készüléket kereskedelmi forgalomban kapható műbőr-ápoló termékkel és száraz, puha törlőkendővel tisztítsa.
4. Kérjük, ne merítse a Quattromed V készüléket vízbe vagy más folyadékba a tisztítás során.
5. A tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a Quattromed V készüléket.
6. Ügyeljen arra, hogy a gombokon keresztül ne kerüljön folyadék a távirányítóba.
7. Ha nem használja a Quattromed V készüléket, akkor válassza le az áramellátásról.

Technikai adatok

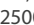Hátrész méretei:	75 x 45 x 20 cm
Ülőrész méretei:	7,5 x 45 x 42 cm
Súly:	10 kg
AC adapter feszültség:	
Bemenet:	100-240V~, 50/60 Hz
Kimenet:	24V  , 2500 mA
A termék feszültsége:	24V 
Névleges teljesítmény:	
üzemben:	60 watt
Automatikus működési idő:	15 perc

Tanúsítványok:



EU megfelelőségi nyilatkozat

Megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU és a kisfeszültségi villamossági termékekről szóló 2014/35/EU irányelvnek.

Garanciális rendelkezések

A kereskedő a hátoldalon leírt termékre a törvényben meghatározott jótállási időt biztosítja. A garancia a vásárlás napjától érvényes. A vásárlás időpontja a vásárlást igazoló bizonylattal igazolható. A kereskedő a Németországban nyilvántartásba vett termékeket, amelyeknél hibát állapítottak meg, díjmentesen megjavítja vagy kicseréli. Ennek feltétele a hibás termék beküldése a vásárlást igazoló bizonylattal együtt a jótállási vagy garanciális idő lejártá előtt. A garancia érvényét veszti, amennyiben egy hiba megállapítása után a garanciaigény például külső hatások vagy olyan javítás vagy módosítás eredményeként merül fel, amit nem a gyártó vagy a hivatalos forgalmazója hajtott végre.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

- kopó alkatrészek, mint pl. súrlódó anyagok, dolgozó műanyag részek, szövethuzatok, párnák/huzatok
- max. 72 db motorzaj 30 cm-en
- nem megfelelő használatból eredő elhasználódás
- kereskedelmi használat, pl. tömeges használat, többszöri használat időnként 40 perces szünetek nélkül
- ha a készüléket hő, nedvesség vagy folyadék éri
- hegyes és/vagy éles tárgyak okozta károk
- szándékos rongálás, nem rendeltetésszerű használat, túlterhelés vagy baleseti károk
- háziállatok által okozott károk és szennyeződés
- pl. test- vagy hajápolószerek révén kialakult szennyeződés
- sav-, oldószer- vagy alkohol-tartalmú szerek használatából eredő károk

Az eladó által vállalt garancia a termék javítására, illetve cseréjére korlátozódik. E garancia keretében a gyártó, illetve az eladó nem vállal további felelősséget és nem felelős a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából és/vagy a termék helytelen használatából eredő károkért. Amennyiben a gyártó a termék vizsgálatánál megállapítja, hogy a garanciális követelés olyan hibára vonatkozik, amelyre nem érvényes a garancia, illetve a jótállási idő lejárt, az ellenőrzés és a javítás költségeit a vevő köteles viselni.

Casada, mint gyártó, hibátlan áru kiszállítását garantálja a vevők/partnerek részére. Bizonyított gyártási hibák bejelentés és visszaigazolás után cseréjére jogosultak.

Jogi nyilatkozat: Valamennyi tartalom nem gyógyító hatásra vonatkozó kijelentés. Betegségek és más fizikai rendellenességek diagnosztizálása és gyógyítása orvosok, természetgyógyászok vagy terapeuták által végzett kezelést igényel. Az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem használhatók orvosi kezelés helyettesítésére. Minden felhasználót arra kérnek, hogy alapos vizsgálatot, és ha szükséges, szakemberrel való konzultációt követően állapítsák meg, hogy az alkalmazások az adott esetben előnyösek-e. Bármely alkalmazás vagy terápia a felhasználó saját felelősségére történik. Elhatároljuk magunkat bármely gyógyító hatásra vonatkozó kijelentéstől vagy ígéretről.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Németország
info@casada.com
www.casada.com

Copyright A képek és a szöveg a CASADA International GmbH szerzői jogi oltalma alatt áll és nem használható a cég kifejezett jóváhagyása nélkül.

Copyright © 2018 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.

