


time to relax



ATLAS

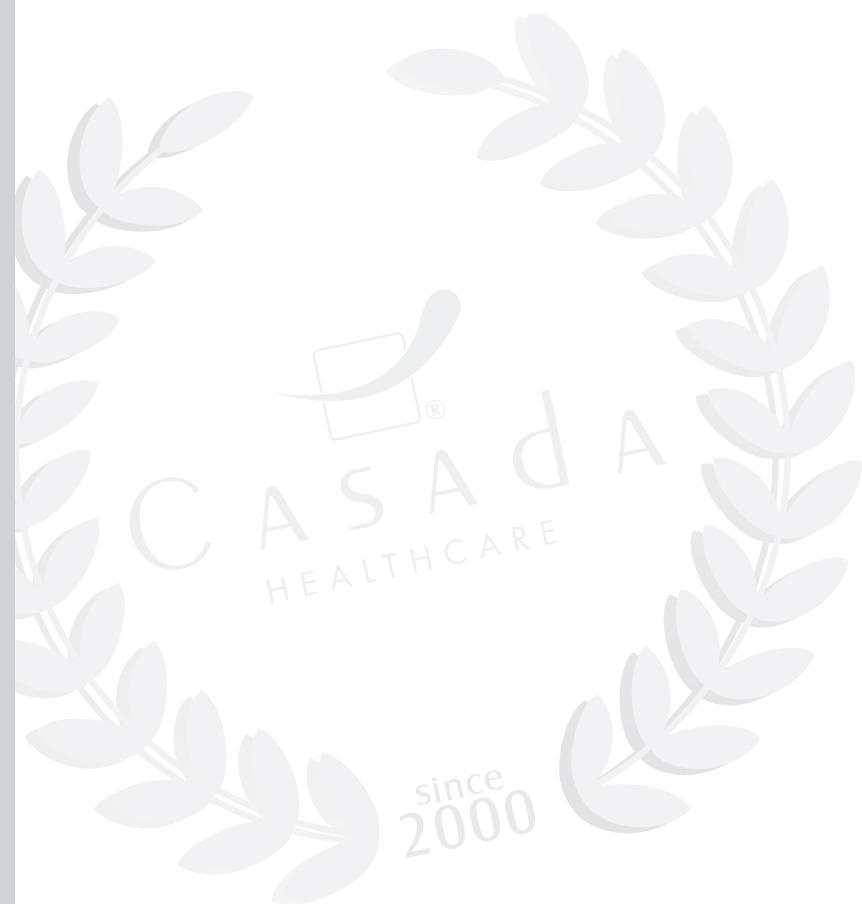

< timetorelax

A CASADA cég 2000 óta létezik és elnyertük annak hírét, hogy első osztályú termékekekt állítunk elő az Ön wellness- és fitness szükségleteinek kielégítésére - CASADA termékeink mára az egész világon elérhetőek!

Folyamatosan keressük az új innovációkat, míg a dizájnunk éppúgy egyedi, mint hatásos. De a CASADA-nál nem csak nagyszerű termékek gyártásáról van szó, hanem az is a középpontban van, hogy javítsuk az Ön életét, lépésről-lépésre.

Gratulálunk!

Örülünk, hogy Ön a Casada Atlas terméke mellett döntött.

Ezzel a masszázsfotelrel Ön jót tesz önmagának és a testének is. Annak érdekében, hogy élvezhesse ezen termék előnyeit, szeretnénk megkérni Önt, hogy olvassa át figyelmesen és kövesse a biztonsági előírásokat.

Sok örömet kívánunk Önnek a Casada **Atlas** termékével!

Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	102
Ellenjavallatok	103
Műszaki adatok	103
Telepítés.....	104
Masszázsfotel elhelyezése.....	105
Összeszerelés	108
Felhasználási útmutató	110
Tisztítás és karbantartás.....	111
Hibaelhárítás	112
EU-Megfelelőségi nyilatkozat.....	113
Jótállási feltételek	113

Biztonsági előírások



Mielőtt üzembe helyezi a masszázs fotelt, kérjük, a kifogástalan működés és az optimális hatásmód biztosítása érdekében figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót!

- A masszázs fotel megfelel a jelenlegi műszaki elvárásoknak és az aktuális biztonsági előírásoknak.
- A masszázs fotel fűtött elemekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óvatosan használják a készüléket. (ICE 60335-2-32)
- A masszázs fotel nem igényel karbantartást. Az adott esetben szükséges javításokat csak az erre felhatalmazott szakember végezheti.
- A szakszerűtlen használat, valamint a nem felhatalmazott szakember által végzett javítás biztonsági okokból tilos és a garancia elvesztését vonja maga után.
- A balesetek elkerülése érdekében ujjaival ne nyúljon a masszázs görgők közé.
- Nedves kézzel soha ne érintse meg a hálózati dugót
- Kerülje a masszázs fotel vízzel, magas hőmérséklettel és közvetlen napsugárzással való érintkezését.
- Ne használja a masszázs fotelt magas páratartalommal rendelkező helyiségekben, mint pl. a fürdőszobában.
- Kérjük, ne használja a masszázs fotelt, ha kis helyre beszorítva vagy olyan helyen, ahol el vannak takarva a ventilátorok és nem biztosított a friss levegő áramlása.
- A rövidzárlat veszélyének elkerülése érdekében kérjük, válassza le a masszázs fotelt az áramellátásról, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne használjon sérült hálózati dugókat, kábeleket vagy meglazult foglalatokat.
- A sérült hálózati dugókat/kábeleket csak a gyártó, a szerviz képviselő, illetve szakképzett személy pótolhatja.
- Működési zavarok esetén kérjük, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.
- A nem rendeltetés szerű vagy helytelen használat miatt bekövetkezett kár eseményekre a jótállás nem vonatkozik.
- Hogy az izomzat és az idegek túl erőltetését elkerülje, ne lépje túl a javasolt napi 30 perces masszázsidőt.
- A masszázs fotel megrongálódásának megelőzése érdekében soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- Rövidzárlat vagy tűzveszély elkerülése érdekében feltétlenül a hálózati dugóhoz megfelelő csatlakozó aljzatokat használjon, és gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó teljesen illeszkedjen a csatlakozó aljzatba.
- Használat után és tisztítás előtt feltétlenül válassza le a masszázs fotelt az áramellátásról.
- A tisztítást és a karbantartást 14 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Amennyiben a használat során váratlan áram kimaradás lép fel, akkor a masszázs fotel megrongálódásának elkerülése érdekében kérjük, haladéktalanul állítsa a kapcsolót OFF állásba és húzza ki a hálózati dugót.
- Nedves és megrongálódott villamos kábelekkel tilos a masszázsfotelt működtetni.
- Ha 14 év alatti gyermekek, fogyatékossgal élők vagy rosszabb egészségügyi állapotban levő személyek tartózkodnak a masszázs fotel közelében, illetve azt használják, akkor feltétlenül felügyelet szükséges.
- Kérjük, ne használja a masszázs fotelt közvetlenül az étkezések után vagy alkohol hatása alatt.
- Csak a használati utasításban leírt célra használja a termeket.
- Kérjük csak a mellékelt tartozékokat használja.
- Kérjük a készülék megrongálódásának megelőzése érdekében ne álljon, üljön vagy ugráljon a lábtámaszon.
- A készülék megrongálódásának vagy személyi sérülések elkerülése érdekében ne próbáljon meg a kar vagy a hát-támlára ülni.
- Kérjük rendszeresen tartsa tisztán a masszázs fotelt és ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak a fotel részeibe.
- Kérjük, ne rángassa a masszázs fotel hálózati csatlakozó zsinórját.
- Kérjük a láb támasz vagy a hát támla beállítás során győződjön meg arról, hogy nem kerültek alá más tárgyak, és nem tartózkodnak a közvetlen közelben kiváltépp 14 év alatti gyermekek.
- A termék kizárólag otthoni használatra készült.
- A flexibilis hálózati csatlakozó zsinór meg rongálódása esetén a cseréhez csak azonos flexibilis kábel használható, vagy, amelyet a gyártótól, illetve annak szerviz képviselőjétől kell beszerezni.

Ellenjavallatok

Amennyiben nem biztos abban, hogy használhatja a masszázs fotelt, akkor mindenképpen konzultáljon orvosával.

- A terhesség ideje alatt vagy a masszírozott területen fellepő következő panasz(ok) esetén a masszázs fotel használata tilos: Friss sérülések, trombozisos megbetegedések, gyulladások és bármilyen típusú duzzanat, valamint rákos megbetegedések esetén. Barmely orvosi kezelés során végzendő masszázs az orvossal történt egyeztetés után javasolt.
- Testi, érzékszervi vagy pszichikai zavarokkal elő, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek a masszázs fotelt csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete és irányítása mellett használhatják.
- A masszázs fotel használatából eredő kellemetlenségek vagy veszélyek megelőzése érdekében kérjük, hogy a következő személyek forduljanak orvoshoz a masszázs fotel használata előtt:
 - Fekvő betegek
 - Orvosi kezelés alatt álló személyek
 - Hatpanaszokban szenvedő betegek, gerinc problémákkal vagy gerinc ferdeüléssel küzdő személyek.
 - Szívritmus-szabályozót viselők
- A masszázs során fellepő fájdalom érzetek esetén kérjük, haladéktalanul szakítsa meg a használatot.
- Használat során fellépő sérülések esetén kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
- Kérjük, ne masszírozzon bepírosodott, megdagadt vagy gyulladt bőr felületet.
- Ez a masszázs fotel csak az otthoni wellness-masszázs céljára szolgál, nem orvosi masszázs készülék és ezért nem tudja pótolni a szakorvosi kezelést.
- Napi 30 perces kezelés javasolt a masszázs fotellel. Ugyanazt a testreszt legfeljebb 15 percig masszírozza, mivel a túlzott masszázs miatt ellenkező hatás lephet fel.
- Ez a termék 14 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- 14 év alatti gyermekek különösen nagy figyelmet igényelnek. Győződjön meg róla, hogy nem játszanak a masszázs fotellel.



Műszaki adatok

Model:	CMS-301
Neve:	Atlas
Mérete:	állítva: 79 x 142 x 123,5 cm fekve: 79 x 158,5 x 112 cm
Súly:	86,5 kg
Feszültség:	100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény:	80 W
Biztonság:	1. Oszt.
Menetidő:	20 perc (masszázsidő a számláló függvényében)
Tanúsítványok:	 



Telepítés

Utasítások a kártyaolvasó telepítéséhez vagy a csere módzatai


1. Távolítsa el a négy süllyesztett fejű csavart egy csavarhúzóval, aztán vegye le a kezelő felület fedelét (1. kép - 2. kép).

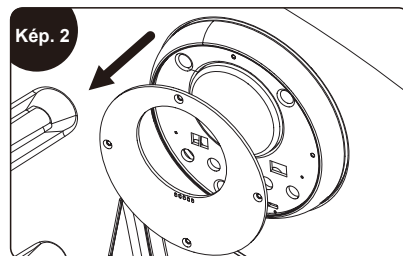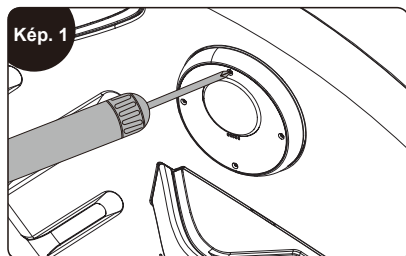

2. Távolítsa el a három keresztfejű csavart egy csavarhúzóval és vegye le a kezelő panelt (3. kép - 4. kép).

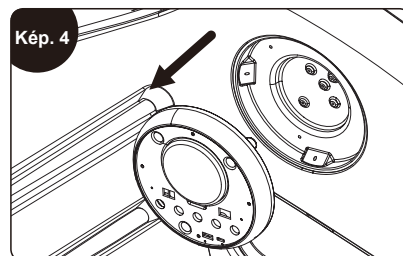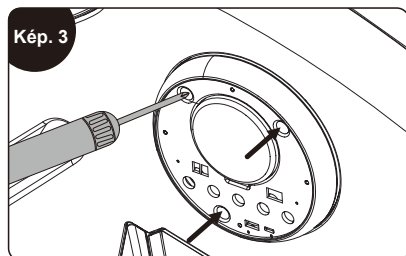

3. Építse be az Ön által megvásárolt Nayax készüléket (5. kép).

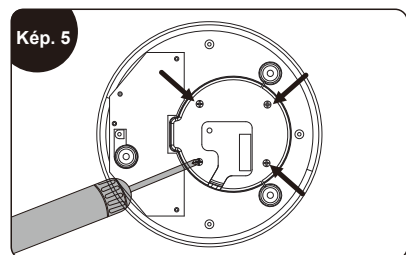


Masszázsfofel elhelyezése

Elhelyezés

Ügyeljen arra, hogy a faltól való távolság legalább 5 cm legyen, hogy a szék teljesen hátradőlhessen.



Övja a fotelt a túl magas szobahőmérséklettől. Úgy helyezze el, hogy elkerülje a közvetlen napsugárzást és megfelelő távolságot biztosítson a fűtőberendezésektől. A padló sérülésének elkerülése érdekében alátétet (pl. szőnyeget) javasolunk.

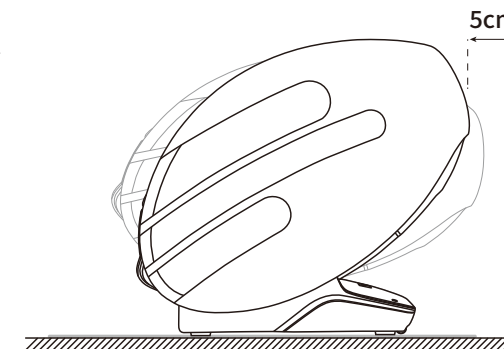


A fotel mozgatása


A sérülések elkerülése érdekében a fotel felemelése és mozgatása csapatmunkát igényel.




Kérjük, emelje fel a masszázsfotelt, ha érzékeny felületeken, például fapadlón mozgatja. Amikor a fotelt felemeli és a kívánt helyzetbe mozgatja, ügyeljen arra, hogy kezeit és lábát védje a zúzódástól. Csak akkor engedje el a székét, ha az vízszintes. A padló sérülésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy helyezzen el védőszőnyeget a padlón.


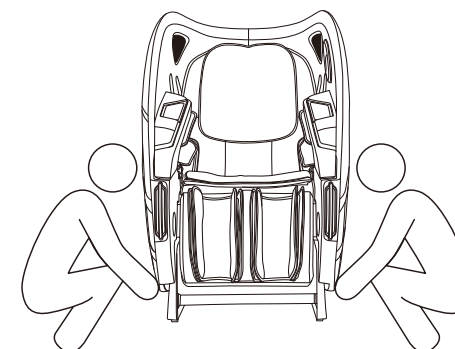



Masszázsfofel elhelyezése

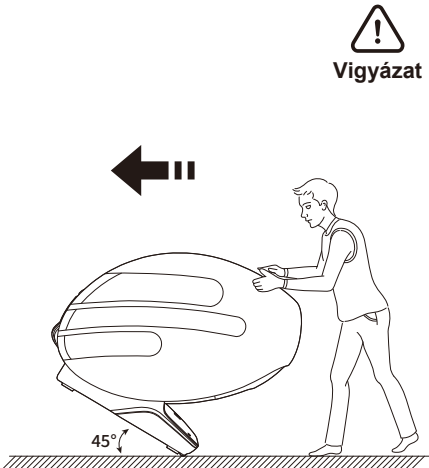Mozgatás	
Használja a hátul lévő görgőket a masszázsfotel mozgathatásához. Mozgassa a széket úgy, hogy körülbelül 45°-kal hátradönti (lásd az ábrát). Megjegyzés: A túl erős mozgatás hatására a szék felborulhat, és megsérülhet. Mielőtt elmozdítaná a széket, állítsa vissza eredeti helyzetébe, majd kapcsolja ki az áramellátást. Kérjük, csak akkor mozgassa a széket, ha nincsenek rajta emberek vagy tárgyak. Ne tolja a széket 2 mm-nél magasabb akadályokon vagy 5 mm-nél szélesebb résekben. Ha a széket a görgők segítségével mozgatja, egyetlen folyamatos mozgás nem lehetséges; Ha a távolság több mint 50 méter, kérjük, lassan és egyenletesen mozgassa a széket, hogy elkerülje a sérülést.	Vigyázat 

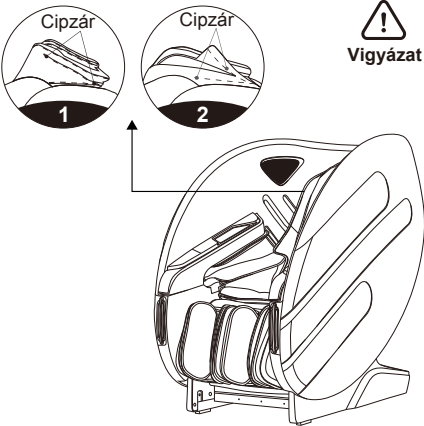Szerelje le a fejtámlát és a háttámla párnáját	
A fejtámasz párna használatával csökkenthető a gyúrómasszázs intenzitása a nyak és a váll területén. Igénevei szerint döntheti el, hogy használja-e a fejtámla párnát (ajánlott). A háttámla párna cipzárral (1), a fejtámla párna pedig cipzárral (2) csatlakozik a háttámla párnához.	Vigyázat 


Masszázsfofel elhelyezése

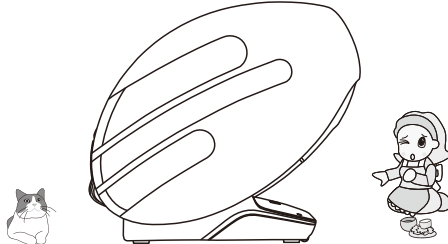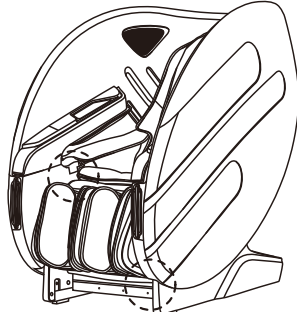Nézzon körül	
Vigyázat	Ügyeljen arra, hogy ne legyenek gyerekek, háziállatok vagy más személyek a készülék közelében. 
Vigyázat	A masszázs megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy nincs idegen tárgy a lábán, lábfejen stb. Semmi esetre sem szabad kezeknek, a lábaknak vagy a fejnek a lábtámaszok és a készülék, illetve a kartámasz és a készülék közötti térbe kerülnie. Ügyeljen arra, hogy soha ne tegye a kezét, lábát vagy fejét a masszírozó szövet- vagy bőrborítása alá. 

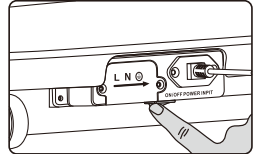Kapcsolja be a készüléket	
Vigyázat	A kapcsolódoboz csatlakoztatásának bemutatása. 
Figyelem	Nyomja meg a hálózati kapcsolót a kapcsolódoboz alján. 
Figyelem	- Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó nem sérült-e. - A termék tápellátásának meg kell felelnie a megadott követelményeknek. - Ne használjon más hálózati adaptert, mint ami ehhez a termékhez készült. - Ne csatlakoztasson nem jóváhagyott hálózati adaptert a termék áramellátásához.

Összeszerelés


A termék elemeinek leírása

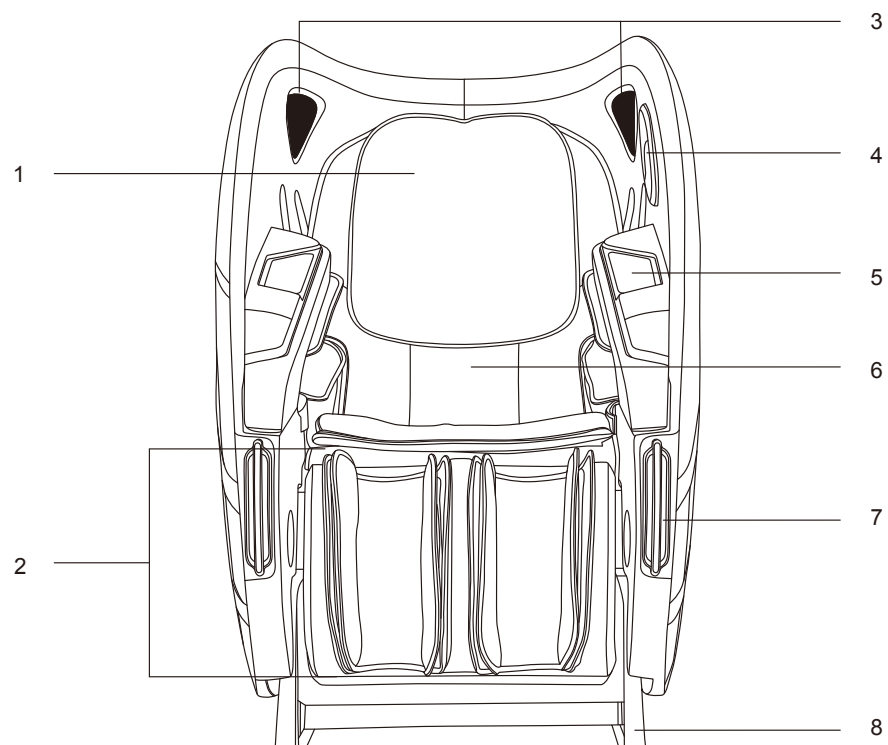

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Fejpárna | 5. Kábel nélküli töltőállomás |
| 2. Láb mechanizmus | 6. Hátpárna |
| 3. Hangszóró | 7. Környezeti világítás |
| 4. Kezelőpanel | 8. Oldalborítás |


Összeszerelés

A különböző funkciók sematikus bemutatása

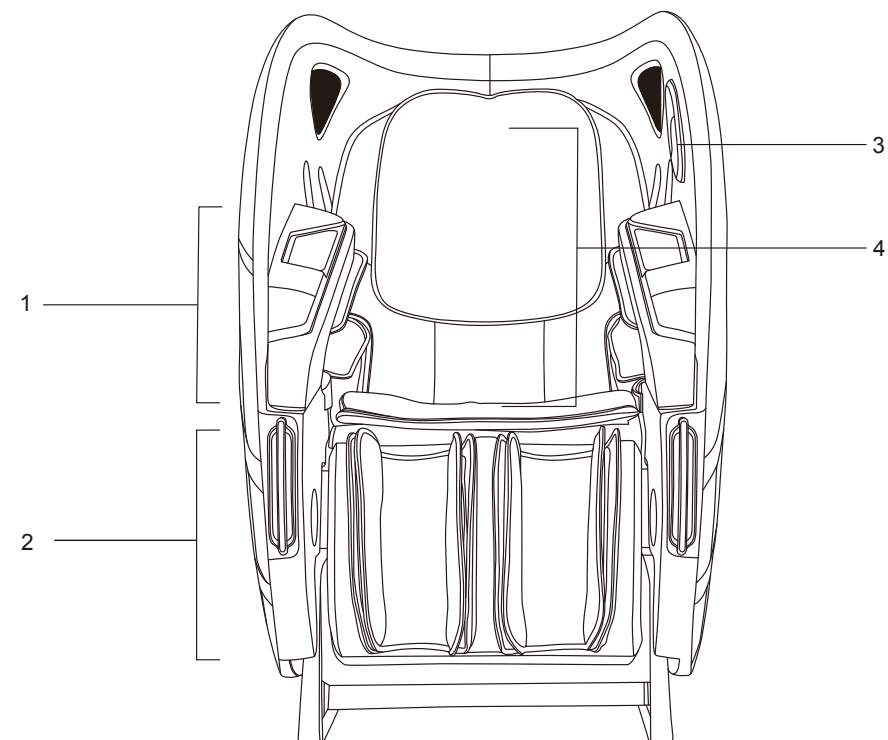

- | |
|---------------------------|
| 1. Kéz légpárnás masszázs |
| 2. Láb légpárnás masszázs |
| 3. Kar légpárnás masszázs |
| 4. Felső test masszázs |

Felhasználási útmutató

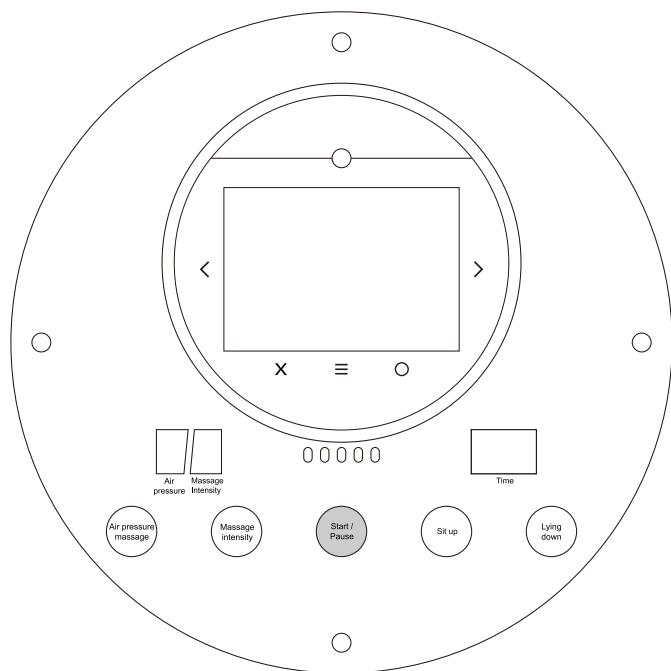

Start/Szünet

Nyomja meg röviden a masszázst megszakításához vagy a masszázst folytatásához.

Légnyomás intenzitása

A készülék képes arra, hogy a légnyomás erősségét három fokozatban szabályozza, ahol a legalacsonyabb fokozat a leggyengébb és a legmagasabb fokozat a legerősebb intenzitást jelenti. Az aktuális fokozatot fent mutatja a kijelző.

Masszázs intenzitása

Állítsa be a masszázst. A készülék képes arra, hogy a légnyomás erősségét három fokozatban szabályozza, ahol a legalacsonyabb fokozat a leggyengébb és a legmagasabb fokozat a legerősebb intenzitást jelenti. Az aktuális fokozatot fent mutatja a kijelző.

Felülni

Ha ezt a gombot megnyomja, lassan felemelkedik a háttámla.

Lefekdni

Ha megnyomja ezt a gombot, a háttámla lassan lefekszik, aztán nyomja meg újra, ha meg kívánja állítani.

Idő


A masszázst hátralevő időtartamát mutatja.

Tisztítás és karbantartás

Műbőr és műanyag alkatrészek tisztítása

Törölje le a bőrt puha, száraz ruhával.

- Ne használjon vegyszereket, például oldószert, benzint, alkoholt stb. a készülék tisztításához.
- A kereskedelemben kapható bőrápoló termékek (rongyok) használatkor be kell tartani a használati utasítást.
- Ha a műbőr különösen szennyezett, törölje le az alábbiak szerint:
 - Mártsa be egy puha rongyot 3–5%-os semleges mosószerezes vízbe vagy forró vízbe, majd alaposan csavarja ki.
 - Puha ronggyal törölje le a bőrfelületet.
 - Törölje le a tisztítóoldatos tiszta vízben megnedvesített és jól kicsavart ruhával.
 - Törölje ki egy kicsavart puha ruhával.
 - Hagyja a készüléket levegőn megszáradni.
- Ha nehéz eltávolítani a foltokat, mártsa be a kereskedelemben kapható melaminhabot semleges mosószerbe, és törölje le a gépet.
- Ne használjon hajszárítót vagy más fűtőberendezést a felület szárításához.
- Legyen óvatos, amikor a gépet farmernadrággal vagy színes szövetekkel törölgeti, mivel az anyag színe elszínezheti a műbőr felületét.
- Ne hagyja, hogy ezek az alkatrészek hosszú ideig érintkezzenek a műanyaggal, mert ez elszíneződést okozhat.
- Ne engedje, hogy a műbőr érintkezzen hajfestékekkel, mert ez elszíneződést okozhat.

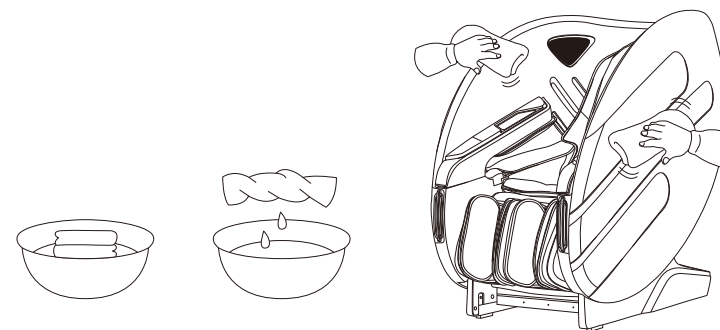

Hibaelhárítás

Hiba	Mit kell tennem, ha a vádlimasszázs vagy a háttámla beállításakor folyamatosan sípoló hangot hallok?
Megoldás	A termék felépítése és ergonómiai kialakítása miatt a kívánt beállítás korlátozott. Ha elérte a határértéket, sípolás hallatszik.
Hiba	A fotel bőr súrlódásának hangját adja, amikor a pozíciót állítjuk be.
Megoldás	A bőr anyagának tipikus tulajdonságai miatt súrlódáskor hangot adhat, ami azonban nem utal hibára. Ennek ellenére felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha szakadás hangját hallja, azonnal állítsa le a készülék üzemeltetését és ellenőriztesse azt egy szakemberrel.
Hiba	A masszázs nem érte el a vállakat vagy a nyakat.
Megoldás	Ha a fej nem éri el a fejpárnát vagy a hát nem érinti a háttámlát, a test formájának felismerése során alacsonyabb lehet a váll pozíciója, mint a tényleges vállpozíció. Helyezkedjen el az ülés legmélyebb pozíciójába, nyomja a fejét a fejpárnához és kezdje a felmérést előről.
Hiba	A készülék sérült. A hálózati kábel vagy a hálózati dugalj szokatlanul forró.
Megoldás	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót. Balesetek megelőzése érdekében forduljon a megfelelő szerviz szakemberhez.

A termékkel kapcsolatos kérdések vagy bizonytalanság esetén nyugodtan fordulhat a megfelelő szerviz szakemberekhez.

EU-Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelel az EMC 2014/30/EU és az LVD 2014/35/EU és RoHs európai irányelveknek.

Jótállási feltételek

A kereskedő a fent leírt termékre a törvény által előírt jótállási időt biztosítja. A jótállás a vásárlás időpontjától érvényes. A dátumot a vásárláskor kapott blokkal kell igazolni. A kereskedő a Németországon belül regisztrált azon termékeket, amelyeken hibákat észlelnék, költségmentesen megjavíttatja, illetve pótolja. Ez nem vonatkozik a gyorsan kopó részekre, mint például a szövet huzatokra. A jótállás érvényesítéséhez a hibás eszközt be kell küldeni a vásárláskor kapott blokkal együtt meg a jótállási idő lejártá előtt.

A jótállási igény megszűnik, amennyiben megállapításra kerül, hogy a hibát pl. külső behatás vagy nem a gyártó, vagy az erre jogosult kereskedelmi partner által elvégzett javítás, illetve átalakítás okozta. A kereskedő által nyújtott jótállás a termék javítására, illetve cseréjére korlátozódik. A jótállás kereten belül a gyártó, illetve a kereskedő nem vállal további felelősséget és nem felelős olyan karokért, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt es/vagy a termék hibás használata során keletkezett.


Ha a gyártó a termék átvizsgálása során megállapítja, hogy a jótállási igény olyan hibára vonatkozik, amely nem tartozik a jótállásba, vagy a jótállási idő lejárt, akkor a termék átvizsgálásának és javításának költségei vevőt terhelik.

Jogi tudnivaló: A tartalmak egyike sem képez gyógyászati kijelentést. Betegségek és más testi zavarok diagnózisa és terápiája orvosi, természet gyógyászati vagy terapeuta általi kezelést tesznek szükségessé. Az adatok kizárólag informatív jellegűek és nem pótolhatják az orvosi kezelést. Minden felhasználó köteles gondos ellenőrzés és adott esetben egy specialistaval történő konzultáció után megállapítani, hogy az alkalmazás előnyös-e a konkrét esetben. Minden alkalmazás vagy terápia a felhasználó felelősségére történik. Tartózkodunk bármilyen gyógyászati kijelentésektől vagy ígéretektől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Németország
info@casada.com
www.casada.com

A képek és a szövegek szerzői joga a CASADA International GmbH cég birtokában van, ezek további felhasználása tilos a cég kifejezett hozzájárulása nélkül.
Copyright © 2024 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.





Lined writing area for page 114.



Lined writing area for page 115.

